

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

USER'S MANUAL



JUOSMENS-KRYŽKAULIO ĮTVARAI KR 0-17-3 / KR 0-17-4

LUMBOSACRAL ORTHOSIS KR 0-17-3 / KR 0-17-4

Anatomiškai išformuoti įtvarai optimaliai apspaudžia. Skirtingo standumo šoniniai fiksatoriai sutvirtina juosmeninę stuburo sritį. Silikoninis pelotas masažuoja juosmenį (esant poreikiui, jį galima nuimti).

Rekomenduojamas, esant juosmens srities skausmams, radikulitui, juosmens srities raumenų ir raiščių patempimui; liemens sričiai apsaugoti.

Anatomically formed orthoses optimally compresses and supports the lumbar section of spine by lateral fixers of different rigidity. Silicone pellote massages the lumbar section of spine. If necessary, the pellote can be removed.

Recommended in cases of pain in the lumbar section, radiculitis, strain of muscles and ligaments in the lumbar section as well as to protect the lumbar section.



Sudėtis: 70 % poliamidas, 18 % guma, 7 % elastanas, 5 % viskozė.

Composition: 70 % polyamide, 18 % rubber, 7 % elastane, 5 % viscose.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. In order the product performs its functions effectively correct size has to be chosen (see Table below). Orthose should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
cm	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130


Rekomendacijos:

Dėl gaminio dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju, ypač šiais atvejais: odos vientisumo pažeidimams atitinkamoje kūno vietoje, kraujotakos sutrikimams, širdies nepakankamumui. Prieš juosiantis įtvarą, juosmens srities nepatariama tepti tepalais, losjonais ar kitais riebiais preparatais. Nedėvėkite įtvaro, jeigu atsirado alerginių odos pakitimų ar kitų nemalonių pojūčių. Gaminį reguliariai skalbkite, kad išlaikytumėte mezginio kompresiją.

Recommendations:

The therapist shall be consulted regarding the expedience and duration of wearing the product in case of: skin solidity damages in the respective area of the body, bloodstream disorders, heart deficiency. The waist area shall not be covered with oil, lotions or other greasy preparations before putting on the support. Do not wear the support in case of any allergic skin changes or other unpleasant sensations.

Priežiūra/ Washing instructions:

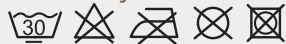

Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.



Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16